

MEDI CAPTURE

L'enregistrement d'images
rapide et facile



MediCap™ USB170

Le MediCap USB170 est l'enregistreur d'images fixes toute fonction le plus convivial du secteur médical. Les images sont enregistrées directement sur une clé USB ou sur un disque dur optionnel, une méthode tellement plus simple que de tenter d'enregistrer des images à l'aide d'un enregistreur DVD.



Enregistreur d'images médicales fixes

Le MediCap est encore plus simple à utiliser que la caméra de poche que vous utilisez pendant vos loisirs. Il enregistre des images de haute qualité provenant des endoscopes, des arthroscopes, des caméras de chirurgie, des ultrasons, etc.

Convivial

Il est tellement facile à utiliser que la plupart des utilisateurs n'ouvrent jamais la notice d'utilisation. Vous n'avez qu'à le brancher et à l'utiliser. Vous enregistrerez des images fixes quelques minutes seulement après l'avoir déballé.

De qualité médicale

L'enregistreur USB170, grâce à son boîtier métallique robuste et sa face avant en plastique résistant aux fluides, est conçu pour résister aux rigueurs de la salle d'opération et est tellement compact qu'il se loge sur tout chariot.



Fonctionnalités puissantes

Compatible – Polyvalent – Abordable



Disque dur USB

Parfait pour stocker des milliers d'images sur un seul dispositif



Clavier USB

Entrez les données du patient pour le classement des photos



Carte réseau

Transformez votre USB170 en lecteur adressé sur votre réseau



Pédale


Branchez votre USB170 au déclencheur de votre endoscope ou à une pédale



Caractéristiques techniques

MediCap USB170

Type d'appareil	Enregistreur d'images médicales fixes Enregistre des images fixes provenant de sources vidéo médicales standards sur une clé USB ou un disque dur USB optionnel
Boîtier	Boîtier métallique robuste avec face avant en plastique résistant aux chocs
Écran LCD	2,5 pouces couleur (pour la confirmation vidéo seulement, pas pour le diagnostic)
Boutons	Membrane étanche résistant aux liquides
Entrée/sortie vidéo	PAL ou NTSC; Connecteurs S-vidéo et BNC composite
Interface USB	USB 2.0 haute vitesse, 1 connecteur avant, 3 connecteurs arrière (tous alimentés)
Mise en réseau	Connexion Ethernet 10/100Base-T avec le kit réseau optionnel
Pédale/Déclencheur	Prise d'images mains-libres Connecteur jack standard 3,5 mm
Caractéristiques physiques	Dimensions : 240 x 200 x 63 mm Poids : 1,7 kg environ
Conditions ambiantes	Stockage : -40 à +85 °C Fonctionnement : -20 à +40 °C
Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz Prise secteur à 3 broches
Supports de données	Clé USB ou disque dur externe USB
Formats d'image	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
Tailles d'image	1024 x 768, 800 x 600 et 640 x 480 pixels
Homologations	CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 CSA C22.2 No.601.1, E 306417 FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS
Contenu de l'ensemble	MediCap USB170 Clé USB Câbles vidéo Cordon d'alimentation Notice d'utilisation

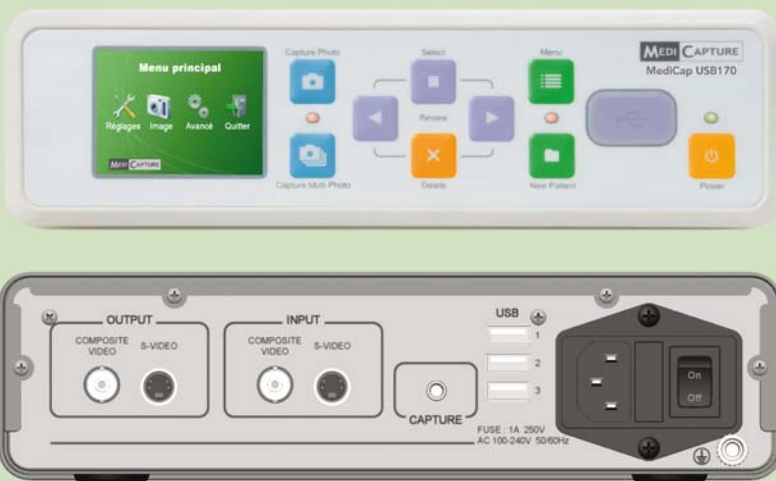

Également disponible...



MediCap™ USB300

Toutes les fonctionnalités de l'USB170, plus l'enregistrement vidéo HD.

MediCapture, Inc.

580 W. Germantown Pike, Ste. 103
Plymouth Meeting, PA 19462 USA

(888) 922-7887
(503) 445-6935

www.medicapture.com
sales@medicapture.com