

MEDI CAPTURE

Medizinische Archivierung
leicht gemacht



MediCap™ USB170

Das MediCap USB170 ist die branchenweit benutzerfreundlichste, voll ausgestattete Bildaufnahmelösung im medizintechnischen Bereich. Ihre Bilder werden direkt auf einem USB-Stick oder einer optionalen Festplatte aufgenommen – diese Methode ist wesentlich einfacher, als Bilder mit einem DVD-Rekorder aufzuzeichnen.



Medizinisches Bildaufnahmegerät

Das MediCap ist noch benutzerfreundlicher als Ihre Pocketkamera für den Urlaub. Es nimmt hochauflösende Standbilder von Ihrem Endoskop, Arthroskop, einer Operationskamera oder einem Ultraschallgerät usw. auf.

Benutzerfreundlich

Es ist so einfach, dass die meisten Benutzer nie in die Gebrauchsanleitung schauen. Einfach anschließen und los geht's. Nur wenige Minuten nach dem Auspacken speichern Sie schon Bilder.

Für den medizinischen Bereich

Sein Stahlgehäuse und flüssigkeitsresistentes Bedienfeld schützen das USB170 vor den Einsatzbedingungen im OP. Außerdem ist es so kompakt, dass es auf jeden Gerätetisch passt.



Leistungsstarke Optionen

kompatibel – vielseitig – günstig



USB-Festplatte

Ideal für die Archivierung tausender Bilder auf einem Gerät



USB-Tastatur

Zur Eingabe von Patientendaten, um Ihre Bildersammlung zu ordnen




Netzwerkkarte

Verwandeln Sie Ihr USB170 in ein Netzlaufwerk in Ihrem Netzwerk



Fußschalter

Schließen Sie Ihr USB170 an den Auslöser am Sucher oder an einen Fußschalter an

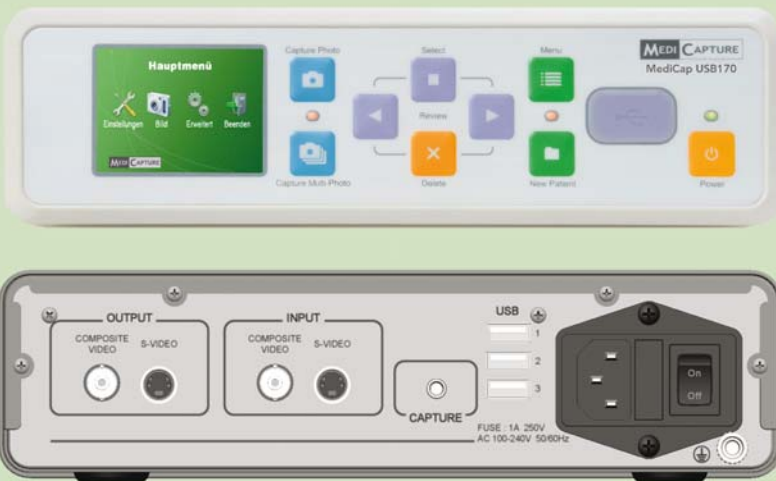

Auch erhältlich...



MediCap™ USB300

Alle Funktionseigenschaften des USB170, plus HD-Videoaufzeichnung.



MediCap™ USB170 Details

- Gerätetyp** Medizinisches Bildaufnahmegerät
Nimmt Standbilder von medizinischen Standardvideoquellen auf einen USB-Stick oder eine optionale USB-Festplatte auf
- Gehäuse** Robustes Metallgehäuse mit Frontabdeckung aus schlagfestem Kunststoff
- LCD-Monitor** 6,35 cm (2,5 Zoll) Farbdisplay (nur zur Navigation, nicht für Diagnosezwecke)
- Tasten** Dichte, flüssigkeitsresistente Folientasten
- Video Ein-/Ausgänge** PAL oder NTSC (über Menü wählbar)
S-Video- oder Composite (BNC)-Anschlüsse
- USB** USB2.0, High-Speed, 1 Frontanschluss, 3 Anschlüsse auf der Rückseite (alle aktiv)
- Netzwerkbetrieb** T10/100 Ethernet-Schnittstelle mittels Netzwerk-Aufrüstset (optional)
- Fußschalter/Auslöser** Freihändiges Aufnehmen
3,5 mm Standard-Miniklinkenstecker
- Maße** Abmessungen: 240 x 200 x 63 mm
Gewicht: 1,7 kg (etwa)
- Umgebung** Lagerung und Transport: -40° bis +85° C
Betrieb: -20° bis +40° C
- Stromversorgung** AC 100-240V 50/60Hz
3-polige Kaltgerätebuchse
- Datenträger** USB-Sticks oder externe USB-Festplatte
- Bildformate** JPEG, TIFF, PNG, DICOM
- Bildgröße** 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 Pixel
- Sicherheitszertifikate** CE 93/42/EEC
UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-2-2
CSA C22.2 No.601.1, E 306417
FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS
- Inhalt** MediCap USB170
USB-Stick
Videokabel
Stromkabel
Gebrauchsanweisung

MediCapture, Inc.

580 W. Germantown Pike, Ste. 103
Plymouth Meeting, PA 19462 USA

(888) 922-7887
(503) 445-6935

www.medicapture.com
sales@medicapture.com