


MEDI CAPTURE

Grabar imágenes de una manera rápida y sencilla

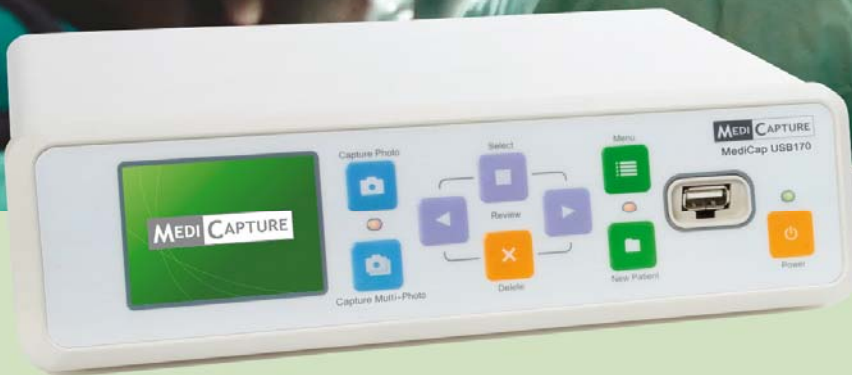

## MediCap™ USB170

El MediCap USB170 es la solución para grabar imágenes con todas las funciones necesarias de la industria médica. Sus imágenes se guardan directamente en una unidad USB o disco duro opcional - siendo éste un método mucho más simple que tratar de capturar imágenes con una grabadora de DVD.



### Grabadora médica de imágenes fijas

El MediCap es aún más simple que la cámara de bolsillo que usted utiliza en sus vacaciones. Graba imágenes fijas de alta calidad desde su endoscopio, artroscopio, cámara quirúrgica, ultrasonido, etc.

### Fácil de utilizar

Es tan fácil, que la mayoría de los usuarios nunca consultan el manual. Simplemente conéctelo y proceda. Usted estará guardando imágenes después de algunos minutos de haber abierto la caja.

### Calidad médica

Con su cubierta de acero y panel delantero resistente a líquidos, el USB170 está construido para resistir los rigores de la sala de operaciones y es tan compacto que cabrá en cualquier carro de transporte.



# Opciones potentes

compatible - versátil - costeable



## Unidad USB

Perfecta para archivar miles de imágenes en un solo dispositivo



## Teclado USB

Ingrese la información del paciente para organizar su biblioteca de imágenes



## Adaptador de red

Convierta su USB170 en una unidad asignada en su red





## Pedal de pie

Conecte su USB170 al disparador de su endoscopio o a un pedal de pie



## Especificaciones de MediCap™ USB170

<b>Tipo de dispositivo</b>	<b>Grabadora de imágenes médicas</b> Graba imágenes fijas desde fuentes de video médicas estándar en una unidad USB o disco duro USB opcional
<b>Funda</b>	Robusta funda metálica con cubierta de plástico de alto impacto
<b>Monitor LCD</b>	6,35 cm. a todo color (sólo para navegación, no para diagnóstico)
<b>Botones</b>	Membrana sellada, resistente a líquidos
<b>Vídeo entr./sal.</b>	PAL o NTSC (menú seleccionable) Conexiones S-video o BNC compuestas
<b>Apoyo USB</b>	USB2.0, alta velocidad, 1 conector frontal, conectores traseros 3 (todos activados)
<b>Conexión de red</b>	Conexión ethernet T10/100 mediante el equipo de ampliación de red (opcional)
<b>Pedal/Disparador</b>	Captura de manos libres Minienchufe estándar de 3,5mm
<b>Mecánica</b>	Tamaño: 240 x 200 x 63mm Peso: 1,7kg (aprox.)
<b>Ambiente</b>	Almacenamiento: de -40° a +85° C Funcionamiento: de -20° a +40° C
<b>Alimentación</b>	AC 100-240V 50/60Hz Enchufe AC de 3 clavijas
<b>Medios</b>	Unidad de memoria USB o unidad de disco duro USB externo
<b>Formatos de imagen</b>	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
<b>Tamaño de imagen</b>	1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 píxeles
<b>Certificados</b>	CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-2 CSA C22.2 No.601.1, E 306417 FCC Part 15. FDA Class 1, RoHS
<b>Contenidos del paquete</b>	MediCap USB170 Memoria USB Cables de video Cable de alimentación Guía de usuario

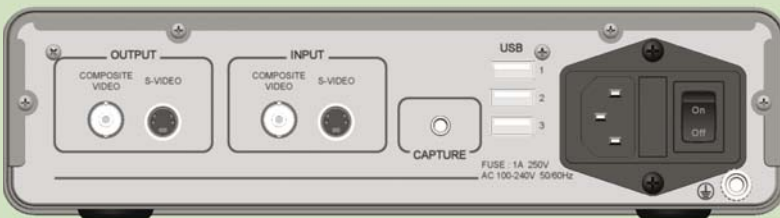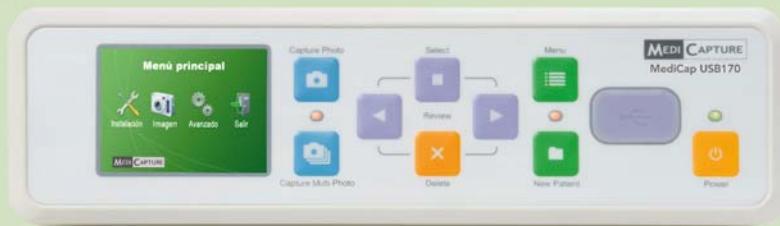

## También disponible...



## MediCap™ USB300

Todas las características del USB170, más grabación de video de alta definición.

## MediCapture, Inc.

580 W. Germantown Pike, Ste. 103  
Plymouth Meeting, PA 19462 USA

(888) 922-7887  
(503) 445-6935

www.medicapture.com  
sales@medicapture.com