

MEDI CAPTURE

Soluzione medicale di registrazione video



MediCap™ USB200

Il MediCap USB200 è la soluzione medicale di registrazione video a configurazione completa più semplice del settore. Le immagini statiche e i video vengono registrati direttamente su un'unità Flash USB o su un disco rigido opzionale. L'apparecchio consente di registrare video di qualità DVD, senza le complicazioni associate ai dischi DVD.



Videoregistratore medicale

Registra dall'endoscopio, artroscopio, videocamera chirurgica, ultrasuoni, ecc. Il salvataggio avviene su un disco rigido o su un'unità Flash a cui si può accedere da qualsiasi computer sulla rete.

Facile da usare

L'utilizzo è molto facile! Solitamente, la maggior parte degli utenti non fa riferimento mai al manuale. È sufficiente attaccare l'apparecchio. Si potranno registrare i video pochi minuti dopo aver aperto la confezione.

Grado medicale

Grazie al contenitore in acciaio e al pannello frontale resistente ai fluidi, l'USB200 è in grado di tollerare il difficile ambiente delle sale operatorie, è compatto e può essere utilizzato in qualsiasi carrello.



Opzioni potenti

compatibile - versatile - economico



Disco rigido USB

Ideale per l'archiviazione di oltre 100 ore di video su un unico dispositivo



Tastiera USB

Inserire i dati del paziente per organizzare le foto e i video





Adattatore di rete

Trasformare l'USB200 in un'unità mappata sulla rete



Pedale

Collegare l'USB200 all'attivatore del visore o al pedale

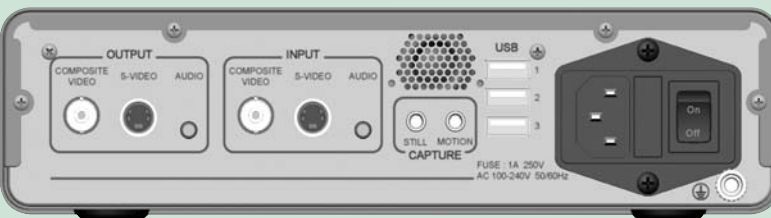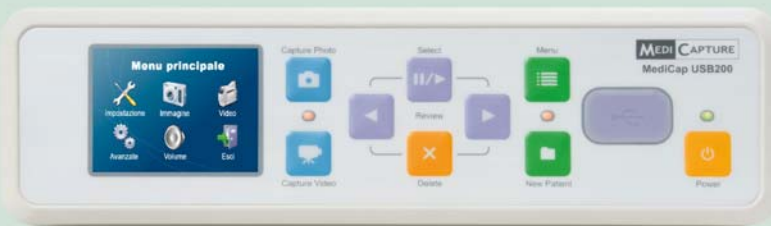

Disponibile anche...



MediCap™ USB300

Tutte le funzioni di USB200, più la registrazione video HD.



Specifiche di MediCap USB200

Tipo di dispositivo	Videoregistratore medicale Registra i video e le immagini statiche digitali dalle sorgenti video analogiche all'unità Flash USB o al disco rigido USB opzionale
Scatola	Scatola di metallo resistente, dotata di pannello frontale in plastica ad alta resistenza
Monitor LCD	2 pollici e mezzo, a tutto colore (solo per la navigazione, non per la diagnosi)
Altoparlante	200 Hz - 15 kHz, 1 W, (solo per la conferma audio, non per la diagnosi)
Tasti	Membrana sigillata, resistente ai fluidi
Ingresso/uscita video	PAL o NTSC; Connessioni S-Video o composite BNC
Ingresso/uscita audio	Mini jack stereo da 3,5 mm
Supporto USB	USB2.0, alta velocità, 1 connettore anteriore, 3 connettori posteriori (tutti alimentati)
Rete	Connessione Ethernet T10/100 tramite Kit di aggiornamento rete (opzionale)
Interruttore a pedale	Acquisizione a mani libere Mini jack standard da 3,5 mm
Dati meccanici	Dimensioni: 240 x 200 x 63 mm Peso: 1,7 kg (circa)
Dati ambientali	Immagazzinaggio: da -40° a +85° C Funzionamento: da -20° a +40° C
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz Presa della corrente con messa a terra
Supporti	Unità Flash USB o disco rigido USB esterno
Formati dell'immagine	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
Dimensioni dell'immagine	1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 pixel
Formato video	MPEG2 (qualità DVD)
Formato audio	MPEG1 L2, 2 canali
Certificazioni	CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CSA C22.2 No.601.1, E 306417, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS
Contenuto del kit	MediCap USB200 Unità Flash USB Cavi video Cavo di alimentazione Guida dell'utente

MediCapture, Inc.

580 W. Germantown Pike, Ste. 103
Plymouth Meeting, PA 19462 USA

(888) 922-7887
(503) 445-6935

www.medicapture.com
sales@medicapture.com