

MEDI CAPTURE

La manera fácil de grabar vídeo e imágenes



MediCap™ USB200

El MediCap USB200 es la solución para grabar imágenes con todas las funciones necesarias de la industria médica. Sus videos e imágenes fijas se graban directamente a una unidad USB o disco duro opcional. Los videos grabados tienen calidad de DVD, pero sin todas las complicaciones de los discos DVD.



Grabadora médica de video

Graba desde su endoscopio, artroscopio, cámara quirúrgica, ultrasonido, etc. Guarda en una unidad flash o disco duro que se puede acceder desde cualquier computadora en su red.



Fácil de utilizar

Es tan fácil, que la mayoría de los usuarios nunca consultan el manual. Simplemente conéctelo y proceda. Usted estará grabando videos después de algunos minutos de haber abierto la caja.



Calidad médica

Con su cubierta de acero y panel delantero resistente a líquidos, el USB200 está construido para resistir los rigores de la sala de operaciones y es tan compacto que cabrá en cualquier carro de transporte.



Opciones potentes

compatible – versátil – costeable



Unidad USB

Perfecta para archivar más de 100 horas de video en un solo dispositivo



Teclado USB

Ingrese la información del paciente para organizar sus fotos y videos





Adaptador de red

Convierta su USB200 en una unidad asignada en su red



Pedal de pie

Conecte su USB200 al disparador de su endoscopio o a un pedal de pie

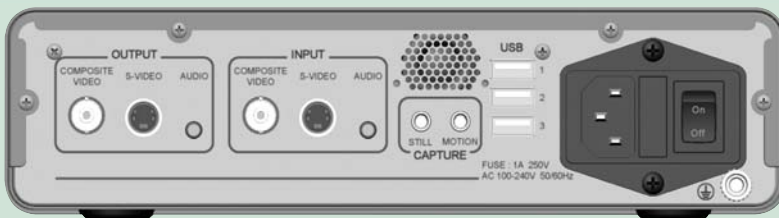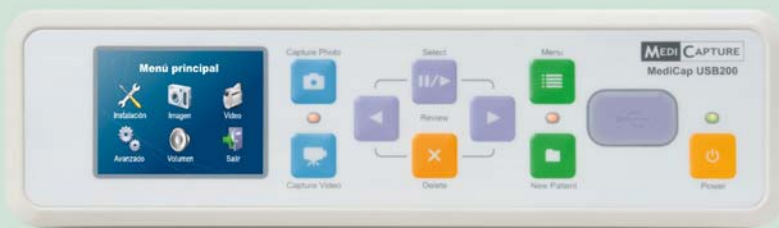

También disponible...



MediCap™ USB300

Todas las características del USB200, más grabación de video de alta definición.



Especificaciones de MediCap™ USB200

- Tipo de dispositivo** Grabadora médica de video
Graba videos e imágenes fijas desde fuentes de video médicas estándar en una unidad USB o disco duro USB opcional
- Funda** Robusta funda metálica con cubierta de plástico de alto impacto
- Monitor LCD** 6,35 cm. a todo color (sólo para navegación, no para diagnóstico)
- Altavoz** 200Hz-15kHz, 1W (sólo para navegación, no para diagnóstico)
- Botones** Membrana sellada, resistente a líquidos
- Video entr./sal.** PAL o NTSC; Conexiones S-Video o BNC compuestas
- Sonido entr./sal.** Enchufes telefónicos estéreo de 3,5mm
- Apoyo USB** USB2.0, alta velocidad, 1 conector frontal, conectores traseros 3 (todos activados)
- Conexión de red** Conexión ethernet T10/100 mediante el equipo de ampliación de red (opcional)
- Pedal/Disparador** Captura de manos libres
Minienchufe estándar de 3,5mm
- Mecánica** Tamaño: 240 x 200 x 63mm
Peso: 1,7kg (aprox.)
- Ambiente** Almacenamiento: de -40° a +85° C
Funcionamiento: de -20° a +40° C
- Alimentación** AC 100-240V 50/60Hz
Enchufe AC de 3 clavijas
- Medios** Unidad de memoria USB o unidad de disco duro USB externo
- Formatos de imagen** JPEG, TIFF, PNG, DICOM
- Tamaño de imagen** 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 píxeles
- Formato de video** MPEG2 (calidad DVD)
- Formato de audio** MPEG1 L2, 2 canales
- Certificados** CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CSA C22.2 No.601.1, E 306417, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS
- Contenidos del paquete** MediCap USB200
Memoria USB
Cables de video
Cable de alimentación
Guía de usuario

MediCapture, Inc.

580 W. Germantown Pike, Ste. 103
Plymouth Meeting, PA 19462 USA

(888) 922-7887
(503) 445-6935

www.medicapture.com
sales@medicapture.com