

MEDI CAPTURE

Grava imagens
rápida e facilmente



MediCap® USB170

O MediCap USB170 é a solução de gravação de imagens completa e mais fácil do setor médico. Suas imagens são salvas diretamente em um pen drive USB ou disco rígido opcional - um método muito mais simples do que tentar capturar imagens com um gravador de DVD.



Gravador de Imagens Médicas Estáticas

O MediCap é ainda mais simples do que a câmera de bolso que você usa nas férias. Ele grava imagens estáticas de alta qualidade para seu endoscópio, artroscópio, câmera cirúrgica, ultra-som, etc.

Fácil de Usar

É tão fácil de usar que a maioria dos usuários nem consulta o manual. Basta conectá-lo e pronto. Você estará gravando imagens em questão de minutos após a abertura da caixa.

Categoria Médica

Com seu estojo de aço e o painel dianteiro resistente a fluidos, o USB170 é fabricado para suportar os rigores das salas de operação e é tão compacto que cabe no seu carrinho.



Opções Poderosas

compatível - versátil - acessível



Disco Rígido USB

Perfeito para arquivar milhares de imagens em um único dispositivo



Teclado USB

Digite os dados do paciente para organizar sua biblioteca de imagens



Placa de Rede

Transforme seu USB170 em uma unidade mapeada em sua rede




Pedal

Conecte seu USB170 a um pedal ou disparador de seu aparelho



Especificações do MediCap® USB170

Tipo de dispositivo	Gravador de Imagens Médicas Grava imagens estáticas de fontes de vídeo médico padrão em pen drive USB ou disco rígido USB opcional
Caixa	Caixa em metal rugoso com capa em plástico de alto impacto
Monitor LCD	2,5 pol. Totalmente a cores (só para navegação, não se destina a diagnóstico)
Botões	Selados com membrana, resistentes a fluidos
Ent./Saída vídeo	PAL ou NTSC; Ligações S-vídeo ou BNC composto
Suporte USB	USB2.0, alta velocidade, 1 conector frontal, 3 conectores posteriores
Funcionamento em rede	Ligação Ethernet T10/100 através do Kit de Actualização de Rede (opcional)
Interruptor de pé	Captura mãos livres Ficha standard de 3.5 mm
Características mecânicas	Tamanho: 240 x 200 x 63mm Peso: 1,7kg (aprox.)
Ambiente	Armazenamento: -40° a +85° C Funcionamento: -20° a +40° C
Potência	AC 100-240V 50/60Hz Ficha de CA de 3 pólos
Suporte de dados	Unidades flash USB ou Unidade de disco rígido USB externa
Formatos de imagem	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
Tamanho da imagem	1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 pixels
Certificações	CE 93/42/EEC, UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CSA C22.2 No.601.1, E 306417, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS
Conteúdo do Kit	MediCap USB170 Unidade flash USB Cabos de vídeo Cabo de alimentação Manual do utilizador

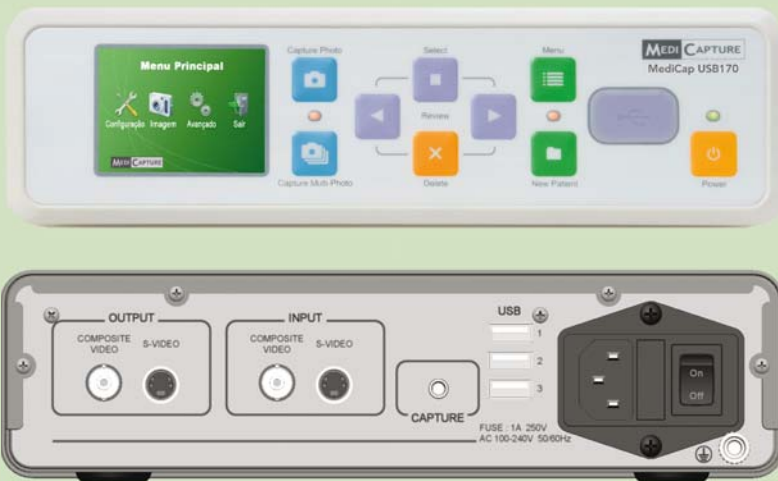

Também Disponível...



MediCap® USB300

Todos os recursos do USB170, mais a gravação de vídeo HD.