

MEDI CAPTURE

Grabar imágenes de una manera rápida y sencilla



MediCap® USB170

El MediCap USB170 es la solución para grabar imágenes con todas las funciones necesarias de la industria médica. Sus imágenes se guardan directamente en una unidad USB o disco duro opcional - siendo éste un método mucho más simple que tratar de capturar imágenes con una grabadora de DVD.



Grabadora médica de imágenes fijas

El MediCap es aún más simple que la cámara de bolsillo que usted utiliza en sus vacaciones. Graba imágenes fijas de alta calidad desde su endoscopio, artroscopio, cámara quirúrgica, ultrasonido, etc.

Fácil de utilizar

Es tan fácil, que la mayoría de los usuarios nunca consultan el manual. Simplemente conéctelo y proceda. Usted estará guardando imágenes después de algunos minutos de haber abierto la caja.

Calidad médica

Con su cubierta de acero y panel delantero resistente a líquidos, el USB170 está construido para resistir los rigores de la sala de operaciones y es tan compacto que cabrá en cualquier carro de transporte.



Opciones potentes

compatible - versátil - costeable



Unidad USB

Perfecta para archivar miles de imágenes en un solo dispositivo



Teclado USB

Ingrese la información del paciente para organizar su biblioteca de imágenes



Adaptador de red

Convierta su USB170 en una unidad asignada en su red




Pedal de pie

Conecte su USB170 al disparador de su endoscopio o a un pedal de pie



Especificaciones de MediCap® USB170

Tipo de dispositivo	Grabadora de imágenes médicas Graba imágenes fijas desde fuentes de video médicas estándar en una unidad USB o disco duro USB opcional
Funda	Robusta funda metálica con cubierta de plástico de alto impacto
Monitor LCD	6,35 cm. a todo color (sólo para navegación, no para diagnóstico)
Botones	Membrana sellada, resistente a líquidos
Vídeo entr./sal.	PAL o NTSC (menú seleccionable) Conexiones S-video o BNC compuestas
Apoyo USB	USB2.0, alta velocidad, 1 conector frontal, conectores traseros 3
Conexión de red	Conexión ethernet T10/100 mediante el equipo de ampliación de red (opcional)
Pedal/Disparador	Captura de manos libres Minienchufe estándar de 3,5mm
Mecánica	Tamaño: 240 x 200 x 63mm Peso: 1,7kg (aprox.)
Ambiente	Almacenamiento: de -40° a +85° C Funcionamiento: de -20° a +40° C
Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz Enchufe AC de 3 clavijas
Medios	Unidad de memoria USB o unidad de disco duro USB externo
Formatos de imagen	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
Tamaño de imagen	1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 píxeles
Certificados	CE 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005, ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2008, E361228, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS, PSE, GOST-R
Contenidos del paquete	MediCap USB170 Memoria USB Cables de video Cable de alimentación Guía de usuario

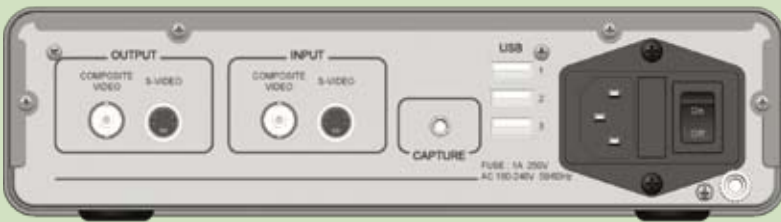

También disponible...



MediCap® USB300

Todas las características del USB170, más grabación de video de alta definición.